

MEDLANCE[®] plus

Lancetas de Seguridad

Características del Producto

Comfort
MAX

CE 0344

Seguro: de un solo uso,
de autodestrucción
sin posibilidad de
reutilización

Simple: operación de
2 pasos intuitivo.
Las tomas de muestras
de sangre más simples
que nunca.

Esteril: agujas
esterilizadas
con radiación
Gamma.

Suave: agujas ultra afiladas,
idealmente colocadas durante
la penetración de la piel.

Adaptado: disponible en 5 versiones
diferentes para satisfacer las
necesidades de muestras de sangre
específico y hacer frente a la variedad
de tipos de piel de los pacientes.

Eficiente: un diseño de "técnica
independiente" proporciona un flujo
sanguíneo adecuado.



BOX 100ct
200ct

Medlance® plus SuperLite

30G
Needle Tip
1.2 mm

Nº Cat. 7241
Caja x 200 und.
Nº Cat. 7242
Caja x 100 und.



**Comfort
MA**

La recolección de sangre nunca ha sido tan sencilla! Punta de aguja 30G especialmente diseñada para brindar mayor comodidad al paciente sin comprometer la facilidad de uso.

Medlance® plus Lite

25G
Needle
1.5 mm

Nº Cat. 7043
Caja x 200 und.
Nº Cat.
Caja x 100 und.



ideal para fines de monitoreo de glucosa en sangre.

Medlance® plus Universal

21G
Needle

Profundidad de penetración
1.8 mm

Nº Cat. 7044
Caja x 200 und.
Nº Cat. 7244
Caja x 100 und.



Siempre que necesite muestras de sangre más grandes para la prueba de glucosa, hemoglobina, colesterol, tipo de sangre, coagulación, gases en sangre y muchos otros.

Medlance® plus Extra

21G
Needle

Profundidad de penetración
2.4 mm

Nº Cat. 7045
Caja x 200 und.
Nº Cat. 7245
Caja x 100 und.



Piel del paciente dura? Se necesita más sangre? Utilice Medlance® plus Extra y recoja muestra de sangre más grandes, también de hombres y de trabajadores físicos.

Medlance® plus Special

0.8mm
Blade

Profundidad de penetración
2 mm


Nº Cat. 7046
Caja x 200 und.
Nº Cat. 7246
Caja x 100 und.



Medlance® plus Special es perfecta para las pruebas que requieren grandes muestras de sangre. Su hoja ultra afilada ofrece un volumen sanguíneo adecuado.

Instrucciones de Uso

1. Girar

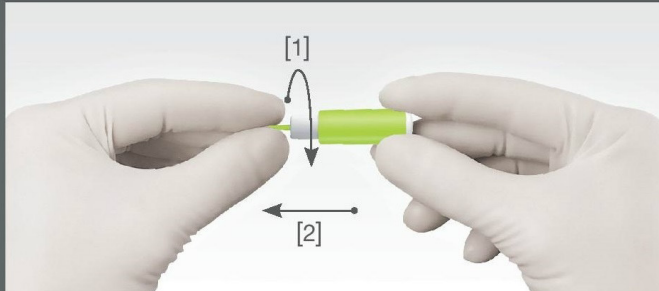


Desenroscar la tapa protectora y luego tire de ella hacia afuera.

2. Presionar



Pulse el Medlance® plus del cuerpo firmemente contra el sitio de punción para activar el dispositivo. Deseche las lancetas usadas en un contenedor apropiado.

3. Recoger

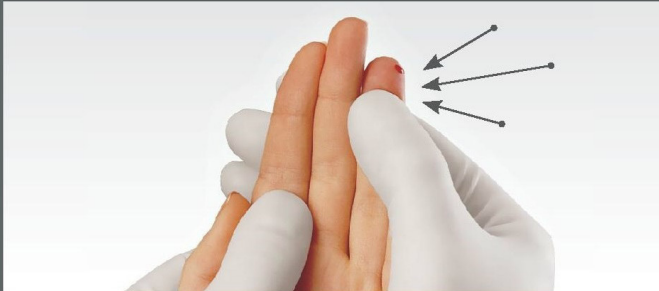

Aplique suavemente presión cerca de la zona de punción para obtener el volumen de sangre requerido.

HTL STREFA
high tech lab

Distributed in the US by:
HTL-STREFA, Inc.
3005 Chastain Meadows Pkwy, Suite 300,
Marietta, GA 30066, USA
T: +1 770 528 0410, F: +1 770 528 0411
info@htl-strefa.com • www.htl-strefa.com

Manufactured by:
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7,
95-035 Ozorków, Poland
T: +48 22 587 05 72, F: +48 22 811 05 36
info@htl-strefa.pl • www.htl-strefa.pl